



Product for use by dental professional on dental patient only.

(FR) Produit destiné à être utilisé par un professionnel des soins dentaires sur un patient dentaire uniquement.

(ES) Producto para uso de profesionales de la odontología en pacientes odontológicos.

(NL) Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door bevoegde tandheelkundige zorgverleners bij slechts een patiënt.

(DE) Produkt nur zur Verwendung durch Zahnmedizinische Fachkräfte bei Zahnpatienten.

(IT) Il prodotto è destinato all'uso da parte dei soli dentisti su pazienti odontoiatrici.

(PT) Este produto deve ser usado por um dentista profissional num único paciente.

Use of dental barrier does not replace cleaning and disinfection of dental instruments.

(FR) L'utilisation d'une barrière dentaire ne remplace pas le nettoyage et la désinfection des instruments dentaires.

(ES) El uso de un sistema de barrera odontológico no reemplaza la limpieza y desinfección del instrumental odontológico.

(NL) Het gebruik van een tandheelkundige barrière is geen vervanging van de reiniging en desinfectie van tandheelkundige instrumenten.

(DE) Die Verwendung einer Dentschutzhülle ist kein Ersatz für Reinigung und Desinfektion von Dentalinstrumenten.

(IT) L'uso di barriere non sostituisce la pulizia e la disinfezione degli strumenti dentali.

(PT) O uso de uma barreira dentária não substitui a limpeza e a desinfeção dos instrumentos dentários.

Clean and disinfect dental instruments after each patient as described by the manufacturer of those instruments.

(FR) Nettoyer et désinfecter les instruments dentaires après chaque patient, conformément aux instructions du fabricant de ces instruments.

(ES) Limpie y desinfecte el instrumental odontológico después de cada tratamiento, de acuerdo con la descripción del fabricante del instrumental.

(NL) Reinig en desinfecteer tandheelkundige instrumenten na elke patiënt zoals beschreven door de fabrikant van deze instrumenten.

(DE) Reinigen und desinfizieren Sie Dentalinstrumente nach jedem Patienten gemäß den Vorgaben des Instrumentenherstellers.

(IT) Pulire e disinfettare gli strumenti dentali dopo ciascun paziente come descritto dal produttore degli strumenti.

(PT) Limpe e desinfete os instrumentos dentários após o tratamento de cada paciente conforme descrito pelo fabricante dos respetivos instrumentos.



**Camera Covers
with The SureClear Window™**

Reuse increases risk of patient-to-patient contamination.

(FR) La réutilisation augmente le risque de contamination de patient à patient.

(ES) Reutilizarlo incrementa el riesgo de contaminación entre pacientes.

(NL) Hergebruik verhoogt het risico van kruisbesmetting tussen patiënten.

(DE) Eine erneute Verwendung erhöht das Risiko einer Kontamination von Patient zu Patient.

(IT) Il riutilizzo aumenta il rischio di contaminazione da paziente a paziente.

(PT) A reutilização aumenta o risco de contaminação de um paciente para outro.

If product is torn or punctured, do not use.

(FR) Si le produit est déchiré ou perforé, ne pas l'utiliser.

(ES) Si el producto se rompe de algún modo, no lo utilice.

(NL) Gebruik het product niet als het scheurt of doorboord is.

(DE) Wenn das Produkt eingerissen oder durchstochen ist, verwenden Sie es nicht.

(IT) Se il prodotto è lacerato o forato, non utilizzarlo.

(PT) Não use o produto se este estiver rasgado ou perfurado.

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State competent authority.

(FR) Signaler tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre.

(ES) Notifique cualquier acontecimiento grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro que corresponda.

(NL) Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat.

(DE) Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts an TIDI Products sowie an die zuständige staatliche Behörde.

(IT) Segnalare eventuali eventi gravi legati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente.

(PT) Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com o uso de dispositivos à TIDI Products e à autoridade competente do respetivo Estado-membro.



Made in USA

(FR) Fabriqué aux États-Unis

(ES) Fabricado en EE.UU.

(NL) Vervaardigd in de VS

(DE) Hergestellt in den USA

(IT) Realizzato negli Stati Uniti

(PT) Fabricado nos EUA



Medical Device

(FR) Dispositif médical

(ES) Producto sanitario

(NL) Medisch hulpmiddel

(DE) Medizinprodukt

(IT) Dispositivo medico

(PT) Dispositivo médico

Reuse increases risk of patient-to-patient contamination.

(FR) La réutilisation augmente le risque de contamination de patient à patient.

(ES) Reutilizarlo incrementa el riesgo de contaminación entre pacientes.

(NL) Hergebruik verhoogt het risico van kruisbesmetting tussen patiënten.

(DE) Eine erneute Verwendung erhöht das Risiko einer Kontamination von Patient zu Patient.

(IT) Il riutilizzo aumenta il rischio di contaminazione da paziente a paziente.

(PT) A reutilização aumenta o risco de contaminação de um paciente para outro.

If product is torn or punctured, do not use.

(FR) Si le produit est déchiré ou perforé, ne pas l'utiliser.

(ES) Si el producto se rompe de algún modo, no lo utilice.

(NL) Gebruik het product niet als het scheurt of doorboord is.

(DE) Wenn das Produkt eingerissen oder durchstochen ist, verwenden Sie es nicht.

(IT) Se il prodotto è lacerato o forato, non utilizzarlo.

(PT) Não use o produto se este estiver rasgado ou perfurado.

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State competent authority.

(FR) Signaler tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre.

(ES) Notifique cualquier acontecimiento grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro que corresponda.

(NL) Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat.

(DE) Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts an TIDI Products sowie an die zuständige staatliche Behörde.

(IT) Segnalare eventuali eventi gravi legati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente.


(PT) Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com o uso de dispositivos à TIDI Products e à autoridade competente do respetivo Estado-membro.

TIDI Products, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956, USA
Toll Free: 800.521.1314
International: +1 920.751.4300
www.tidiproducts.com

Made in USA



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

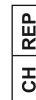

UK Responsible Person:
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr 360 - UL International
Compass House, Vision Park, Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany




Camera Cover Instructions for Use / (FR) Mode d'emploi de l'étui de caméra / (ES) Instrucciones de uso de la funda de cámara / (NL) Gebruiksaanwijzing cameraovertrek / (DE) Kameraabdeckung – Gebrauchsanweisung / (IT) Copertura per videocamera Istruzioni per l'uso / (PT) Cobertura para câmara - Instruções de Utilização




Important – Read First: / (FR) Important – À lire en premier : / (ES) Importante – Léase en primer lugar: / (NL) Belangrijk – eerst lezen: / (DE) Wichtig! Bitte zuerst lesen: / (IT) Importante – Leggere prima dell'uso: / (PT) Importante – Ler primeiro:

Be sure that the camera is facing toward the paper side of the cover. If the camera is facing the plastic film top cover, it will not be aligned with the clear window in the cover. / (FR) Veiller à ce que la caméra soit orientée vers le côté papier de l'étui. Si la caméra est tournée vers le côté du film plastique, elle ne sera pas alignée avec la fenêtre transparente de l'étui. / (ES) Asegúrese de que la cámara esté orientada hacia el lateral de papel de la funda. Si la cámara apunta a la cubierta superior de plástico, no estará alineada con la ventana transparente de la funda. / (NL) Zorg dat de camera naar de papieren kant van de overtrek is gericht. Als de camera naar de plasticfolie aan de bovenkant van de overtrek is gericht, is deze niet uitgelijnd met het transparante venster in de overtrek. / (DE) Stellen Sie sicher, dass die Kamera in Richtung der Papierseite der Abdeckung zeigt. Wenn die Kamera in Richtung der oberen Plastikfolienabdeckung zeigt, ist sie nicht an dem durchsichtigen Fenster in der Abdeckung ausgerichtet. / (IT) Accertarsi che la videocamera sia rivolta verso il lato in carta della copertura. Se la videocamera è rivolta verso la copertura superiore del film in plastica, non sarà in linea con la finestra trasparente della copertura. / (PT) Certifique-se de que a câmara está voltada para o lado da cobertura que contém papel. Se a câmara estiver voltada para a cobertura superior em filme de plástico, não haverá alinhamento com a janela transparente na cobertura.

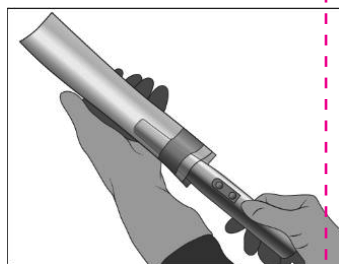


1: Hold the open end of the camera cover with the paper side facing down and insert the camera under the white tab facing the paper. / (FR) Tenir l'extrémité ouverte de l'étui de caméra côté papier vers le bas, et insérer la caméra sous la languette blanche côté papier. / (ES) Asegúrese de que el extremo abierto del lateral de papel de la funda de cámara apunte hacia abajo e introduzca la cámara por debajo de la pestaña blanca y apuntando al papel. / (NL) Houd het open uiteinde van de cameraovertrek met de papieren kant omlaag en breng de camera onder het witte lipje naar het papier in. / (DE) Halten Sie

das offene Ende der Kameraabdeckung mit der Papierseite nach unten und führen Sie die Kamera auf das Papier ausgerichtet unter die weiße Lasche. / (IT) Tenere l'estremità aperta della copertura per videocamera con il lato in carta rivolto verso il basso e inserire la punta della videocamera sotto la linguetta bianca rivolta verso la carta. / (PT) Segure a extremidade aberta da cobertura para câmara com o lado contendo papel voltado para baixo e insira a câmara por debaixo da aba branca voltada para o papel.

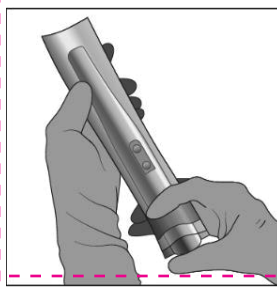


2: Gently slide the camera until it reaches the end of the cover. DO NOT FORCE. If product becomes torn or punctured, do not use. / (FR) Faire glisser doucement la caméra jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité de l'étui. NE PAS FORCER. Si le produit se déchire ou est perforé, ne pas l'utiliser. / (ES) Introduzca suavemente la cámara hasta que alcance el extremo de la funda. NO LA FUERCE. Si el producto se rompe de algún modo, no lo utilice. / (NL) Schuif de camera voorzichtig verder tot aan het einde van de overtrek. NIET FORCEREN. Gebruik het product niet als het scheurt of doorboord wordt. / (DE) Schieben Sie die Kamera vorsichtig hinein, bis sie das Ende der Abdeckung erreicht. ÜBERMÄSSIGEN


KRAFTAUFWAND VERMEIDEN. Wenn die Schutzhülle einreißt oder durchgestochen wird, verwenden Sie sie nicht. / (IT) Far scorrere delicatamente la videocamera fino a quando raggiunge la fine della copertura. NON FORZARE. Se il prodotto viene lacerato o forato, non utilizzarlo. / (PT) Deslize suavemente a câmara até esta chegar ao fim da cobertura. NÃO FORCE O SEU DESLOCAMENTO. Não use o produto se este se rasgar ou perfurar.

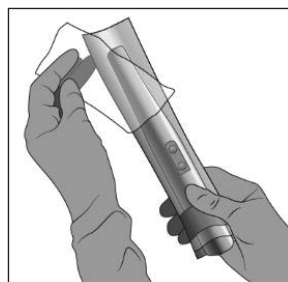

3: Peel back the plastic-film top cover and discard. / (FR) Décoller le film plastique du côté supérieur et le jeter. / (ES) Retire la cubierta superior de plástico y tírela. / (NL) Trek de plasticfolie aan de bovenkant van de afdekking terug en werp deze weg. / (DE) Ziehen Sie die obere Plastikfolienabdeckung ab und entsorgen Sie sie. / (IT) Rimuovere la copertura superiore del film in plastica e smaltire. / (PT) Remova a cobertura superior em filme de plástico e deite-a fora.

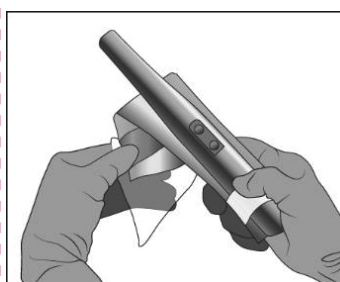

4: Peel back the opposite-side paper cover and discard. / (FR) Décoller le film papier du côté opposé et jetez-le. / (ES) Retire la cubierta de papel del lateral opuesto y tírela. / (NL) Trek de tegenoverliggende papieren afdekking terug en werp deze weg. / (DE) Ziehen Sie die Papierabdeckung auf der anderen Seite ab und entsorgen Sie sie. / (IT) Rimuovere la copertura in carta sul lato opposto e smaltire. / (PT) Remova a cobertura em papel do lado oposto e deite-a fora.

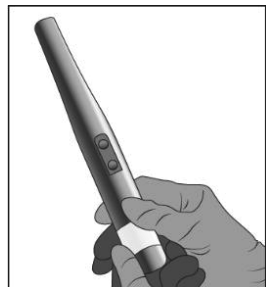

5: Gently continue pushing the camera into the cover, so that the plastic film is tight against the camera. The camera is now ready for normal use. / (FR) Continuer à faire glisser doucement la caméra dans l'étui, de manière à ce que le film plastique soit bien ajusté contre la caméra. La caméra est maintenant prête à être utilisée normalement. / (ES) Continúe introduciendo suavemente la cámara en la funda, de modo que la capa de plástico se ajuste bien a la cámara. La cámara está lista para usarse con total normalidad. / (NL) Duw de camera voorzichtig verder in de overtrek, zodat de plasticfolie stevig tegen de camera zit. De camera is nu gereed voor normaal gebruik. / (DE) Schieben Sie die Kamera vorsichtig weiter in die Abdeckung, sodass die Plastikfolie eng an der Kamera anliegt. Die Kamera kann jetzt

normal verwendet werden. / (IT) Continuare a spingere delicatamente la videocamera nella copertura in modo che il film in plastica aderisca alla punta della videocamera. La videocamera è ora pronta per il normale utilizzo. / (PT) Continue a empurrar suavemente a câmara para dentro da cobertura, de forma a que o filme de plástico aperte bem contra a câmara. A câmara está agora pronta para ser usada normalmente.

6: When treatment has been completed on a single patient, remove the sleeve and properly discard per dental facility guidelines. / (FR) Une fois le patient traité, retirer la gaine et la jeter conformément aux directives de l'établissement dentaire. / (ES) Cuando termine de tratar al paciente, retire el manguito y tírelo de acuerdo con las pautas de la clínica odontológica. / (NL) Na afloop van de behandeling van één patiënt verwijderd u de huls en voert deze op de juiste manier volgens de richtlijnen van de tandheekkundige ihstelling af. / (DE) Entfernen Sie nach Abschluss der Behandlung eines einzelnen Patienten die Schutzhülle und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß entsprechend den Richtlinien der Zahnmedizinischen Einrichtung. / (IT) Una volta completato il trattamento su un singolo paziente, rimuovere la guaina e smaltire adeguatamente in base alle linee guida della struttura odontoiatrica. / (PT) Quando for concluído o tratamento para um único paciente, remova a manga e elimine-a corretamente de acordo com as diretrizes das instalações dentárias.