

### Description Of Product:

A single padded mitt with inspection flap.

**REF** 2825 – Mesh Peek-A-Boo® Mitt

2825



### Indications for Use

- Patients assessed to be at risk of disrupting life-saving treatments (e.g., pulling tubes or lines) or in danger of injury to themselves or to others.

### Contraindications

- Do not use this device with someone who has continued highly aggressive or combative behavior, self-destructive behavior, is deemed to be an immediate risk to themselves or to others.

### CAUTION: Rx Requirements

- Certain types of hand mitts can be considered a restraint. Pinning or otherwise attaching those same mitts to bedding or using a wrist restraint in conjunction with the hand mitts would meet the definition of restraint and the requirements would apply. Refer to CMS Interpretive Guidelines §482.13(e).
- Follow your hospital's restraint policies and procedures which are in compliance with CMS guidelines and state laws.

### Precautions

- A clinical assessment and decision are required when used with monitoring/IV lines or if patient has a wound or dislocated/fractured limb.
- Ensure that mitts are properly secured. If applied too tightly, circulation will be restricted; if applied too loosely, the patient may be able to slip his or her limb from the device.
- **Warning:** Additional or different body or limb restraints may be needed to reduce the risk of the patient getting access to the line, wound, or tube site. (Visit [tidiproducts.com](http://tidiproducts.com))

### Bed Safety

- Refer to the Food and Drug Administration (FDA) for the most recent Hospital Bed Safety Guidelines as well as the Bed Manufacturer for their Instructions for Use.

### Application Instructions

**NOTE: Product is not designed for use with a connecting strap (Visit [tidiproducts.com](http://tidiproducts.com) for other options).**

1. Insert the patient's hand into the mitt, palm down.
2. Wrap the wrist strap around the smallest part of the patient's wrist, through the plastic ring, and secure with the hook-and-loop fastener.
3. Slide ONE finger (flat) between the mitt and the inside of the patient's wrist to ensure proper fit. The strap must be snug, but not compromise circulation.

#### To view hand/fingers:

4. Reach under the inspection flap, detach the hook-and-loop fastener, and pull back the flap to expose the hand.
5. To close the inspection flap, tuck into the end of the mitt and press the hook-and-loop closure together firmly.

**⚠️ WARNING: ALWAYS Monitor patients per facility policy. Improper application or use of any restraint may result in serious injury or death.**

**FOR RX PRODUCTS ONLY: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on order of a physician. For use in a licensed healthcare facility only.**

**STAFF TRAINING:** Posey offers training aids at no charge. Contact Posey online at [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) or call toll-free at 1.800.447.6739.


**BEFORE APPLYING ANY RESTRAINT:**

Follow your hospital's restraint policies and procedures which are in compliance with CMS guidelines and state laws.


**⚠️ ADDITIONAL WARNINGS:**

1. **ALWAYS monitor patient per facility policy. Be aware that constant monitoring may be required for:**

- Aggressive or agitated patients; and
- Patients in a supine position; ensure that being in this position would not cause any complications for those who are at risk of vomiting while being restrained.

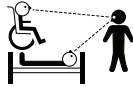

2. **NEVER alter or repair this product. ALWAYS inspect before each use:** Check for broken stitches or parts; torn, cut or frayed material; or locks, buckles, or hook-and-loop fasteners that do not hold securely. DO NOT use soiled or damaged products. Doing so may result in serious injury or death. Dispose of damaged products per facility policy for BIOHAZARDOUS material.

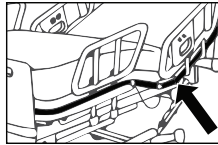

3. **ALWAYS secure straps to a part of the frame that moves with the patient (not foot/head board or siderails, out of the patients reach, using quick-release ties (see drawing below) or buckles.** These allow easy release in the event of an accident or fire. Test to make sure straps cannot tighten, loosen, or slip and create excess slack. If this occurs, the patient may slide off the chair or bed, increasing the risk of serious injury or suffocation. Restraint release is an important part of facility fire and disaster drills. Straps can be cut with scissors in an emergency.

4. **NEVER secure restraint strap to side rail or head/foot board.**

5. **NEVER use Posey products on toilets, or on any chair or furniture that does not allow proper application as directed in the Application Instructions. DO NOT use at home.**



6. **NEVER expose this product to open flame, fire, smoking materials, or high heat sources.** Some products may melt or ignite and burn. The facility smoking/no smoking policy should be strictly enforced.

7. **NEVER use a Posey product as a seat belt in a moving vehicle.**



Posey products are not designed to withstand the force of a crash or sudden stop.

8. Test Zippers or hook-and-loop fasteners before each use. DISCARD device if it does not fasten securely.

**LAUNDERING INSTRUCTIONS (if applicable):**

- Fasten all buckles and locks to reduce risk of damage during wash and dry cycles. DO NOT put buckles or locks through extractors. For maximum life, launder in a laundry bag.
- Before laundering, zip up and turn the product inside out to protect zipper.
- Hook-and-loop fasteners may collect lint after repeated use or laundering, reducing grip strength. Fasten the "hook" to the "loop" before laundering to help prevent lint buildup. As needed, use a stiff-bristle brush to remove lint from the "hook" side.

- These products, other than foam products, can be machine washed under CDC\* guidelines for material soiled with blood or bodily fluid.



- For non-contaminated material, use lower temperature wash and dry cycles to extend product life.

- For foam products:



**BIOTHANE:**


- Sanitize by submerging the entire product in 70% isopropyl alcohol for 10 minutes; or
- Apply an OSHA approved intermediate level disinfectant per manufacturer instructions. After cleaning, products MUST be rinsed with water to remove any residual chemicals.
- Make sure products are completely dry before use.
- Stainless Steel Locks: Posey recommends that locks be treated with a dry-film lubricant (silicone) after each cleaning. For best results, spray a small amount into the lock. Work the action of the lock with a key several times to ensure that all the surfaces are well lubricated.

**STORAGE AND HANDLING:**

- This device is designed for use in normal indoor environments.
- This device may be stored in ambient warehouse temperatures at normal humidity levels. Avoid excess moisture or high humidity that may damage product materials.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

**HOW TO TIE THE POSEY QUICK-RELEASE TIE**

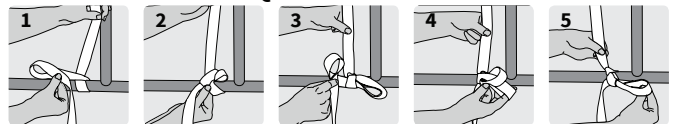

1. Wrap strap once around the frame that moves with the patient (do not attach to side rail or head/footboard), leaving at least an 8" (20cm) tail. Fold the loose end in half to create a loop and cross it over the other end.
2. Insert the folded strap where the straps cross over each other, as if tying a shoelace. Pull on the loop to tighten.
3. Fold the loose end in half to create a second loop.
4. Insert the second loop into the first loop.
5. Pull on the loop to tighten. Test to make sure strap is secure and will not slide in any direction.
6. Repeat on other side. Practice quick-release ties to ensure the knot releases with one pull on the loose end of the strap.




**For RX PRODUCTS ONLY.** Federal law (USA) restricts this device to sale by or on order of a physician. For use in a licensed healthcare facility only.

**STAFF TRAINING:** Tidi offers inservice training aids at no charge. Contact Tidi online at [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) or call toll-free at 1.800.447.6739.

**BEFORE APPLYING ANY RESTRAINT:** Follow your hospital's restraint policies and procedures which are in compliance with USA CMS guidelines and state laws or other governing agencies outside the USA.

**⚠️ ADDITIONAL WARNINGS:**

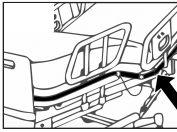
1. ALWAYS monitor patient per facility policy. Improper application or use of any restraint may result in serious injury or death. Be aware that constant monitoring may be required for:
  - Aggressive or agitated patients; and
  - Patients in a supine position; ensure that being in this position would not cause any complications for those who are at risk of vomiting while being restrained.
2. NEVER alter or repair this product. ALWAYS inspect before each use: Check for broken stitches or parts; torn, cut or frayed material; or locks, buckles, or hook-and-loop fasteners that do not hold securely. DO NOT use soiled or damaged products. Doing so may result in serious injury or death. Dispose of damaged products per facility policy for BIOHAZARDOUS material.
3. ALWAYS secure straps to a part of the frame that moves with the patient (not foot/head board or siderails), out of the patients reach, using quick-release ties (see drawing below) or buckles. These allow easy release in the event of an accident or fire.
 

Test to make sure straps cannot tighten, loosen, or slip and create excess slack. If this occurs, the patient may slide off the chair or bed, increasing the risk of serious injury or suffocation. Restraint release is an important part of facility fire and disaster drills. Straps can be cut with scissors in an emergency.
4. NEVER secure restraint strap to side rail or head/foot board.
5. NEVER use Posey products on toilets, or on any chair or furniture that does not allow proper application as directed in the Application Instructions. DO NOT use at home.
6. NEVER expose this product to open flame, fire, smoking materials, or high heat sources. Some products may melt or ignite and burn. The facility smoking/no smoking policy should be strictly enforced.
7. NEVER use a Posey product as a seat belt in a moving vehicle. Posey products are not designed to withstand the force of a crash or sudden stop.
8. Test Zippers or hook-and-loop fasteners before each use. DISCARD device if it does not fasten securely.

**LAUNDERING INSTRUCTIONS** (if applicable):

- Fasten all buckles and locks to reduce risk of damage during wash and dry cycles. DO NOT put buckles or locks through extractors. For maximum life, launder in a laundry bag.
- Stainless Steel Locks: Posey recommends that locks be treated with a dryfilm lubricant (silicone) after each cleaning. For best results, spray a small amount into the lock. Work the action of the lock with a key several times to ensure that all the surfaces are well lubricated.
- Before laundering, zip up and turn the product inside out to protect zipper.
- Hook-and-loop fasteners may collect lint after repeated use or laundering, reducing grip strength. Fasten the "hook" to the "loop" before laundering to help prevent lint buildup. As needed, use a stiff-bristle brush to remove lint from the "hook" side.

• These products, other than foam products, can be machine washed under CDC\* guidelines for material soiled with blood or bodily fluid.



- For non-contaminated material, use lower temperature wash and dry cycles to extend product life.

• For foam products:




- Make sure products are completely dry before use.

**STORAGE AND HANDLING:**

- This device is designed for use in normal indoor environments.
- This device may be stored in ambient warehouse temperatures at normal humidity levels. Avoid excess moisture or high humidity that may damage product materials.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

**HOW TO TIE THE POSEY QUICK-RELEASE TIE**

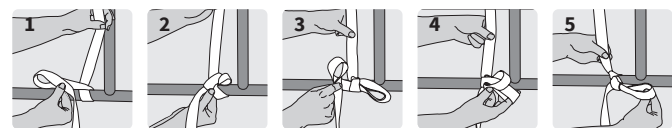

1. Wrap strap once around the frame that moves with the patient (do not attach to side rail or head/footboard), leaving at least an 8" (20 cm) tail. Fold the loose end in half to create a loop and cross it over the other end.
2. Insert the folded strap where the straps cross over each other, as if tying a shoelace. Pull on the loop to tighten.
3. Fold the loose end in half to create a second loop.
4. Insert the second loop into the first loop.
5. Pull on the loop to tighten. Test to make sure strap is secure and will not slide in any direction.
6. Repeat on other side. Practice quick-release ties to ensure the knot releases with one pull on the loose end of the strap.

EN

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. | Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**DISPOSAL:** Dispose of product according to facility guidelines or after thirty-day use or sooner if product is worn or damaged.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA  
Phone: 1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



UK Responsible Person  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
United Kingdom



19200B REV E 2021-05-14



# Sicherheitshinweise für die Verwendung von Posey® Rückhalteprodukten




**NUR für PRODUKTE MIT RX-KENNZEICHNUNG.** Dieses Produkt ist auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Arztes durch das Bundesgesetz (USA) beschränkt. Nur zur Verwendung in einer lizenzierten Gesundheitseinrichtung.

**PERSONALSCHULUNG:** Tidi bietet kostenlose Schulungshilfen an. Kontaktieren Sie Tidi online unter [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) oder rufen Sie in den USA gebührenfrei unter 1.800.447.6739 an.

**VOR DEM ANLEGEN JEDLICHER RÜCKHALTEVORRICHTUNGEN:** Befolgen Sie die Vorschriften und Verfahren für Rückhaltevorrichtungen Ihres Krankenhauses in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen CMS-Richtlinien und den Gesetzen der Bundesstaaten oder anderen behördlichen Richtlinien außerhalb der USA.

## ⚠ ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE:

- Den Patienten IMMER gemäß den Richtlinien der Einrichtung überwachen. Eine unsachgemäße Anwendung oder Handhabung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Beachten Sie, in den folgenden Fällen eine ständige Überwachung erforderlich sein kann:
  - Patienten, die aggressiv oder unruhig sind; und
  - Patienten, die sich in Rückenlage befinden. Vergewissern Sie sich, dass bei Patienten in dieser Position im Falle von Erbrechen während der Fixierung keine Komplikationen auftreten können.
- Ändern oder reparieren Sie dieses Produkt NIEMALS. IMMER vor jedem Gebrauch prüfen: Vergewissern Sie sich, dass keine Nähte oder Teile beschädigt sind, das Material nicht gerissen, angeschnitten oder ausgefranst ist und dass alle Schösser, Schnallen oder Klettverschlüsse sicher halten. Verwenden Sie KEINE verschmutzten oder beschädigten Produkte. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Entsorgen Sie beschädigte Produkte gemäß den Richtlinien für BIOLOGISCH GEFÄHRLICHES Material.
- Sichern Sie die Gurte IMMER außerhalb der Reichweite des Patienten mithilfe der Schnellverschluss-Schlaufen (siehe Abbildung unten) an einem Teil des Bettrahmens, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht am Fuß-/Kopfteil oder an den Seitenleisten). Der Schnellverschluss ermöglicht ein leichtes Lösen im Falle eines Unfalls oder Brandes. Überprüfen Sie, dass die Gurte sich nicht festziehen, lösen oder verrutschen und dass sie nicht übermäßig locker sind. In diesem Fall kann der Patient vom Stuhl oder Bett rutschen, was das Risiko schwerer Verletzungen oder Ersticken erhöht. Das Lösen von Rückhaltevorrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil von Brand- und Katastrophenübungen. Die Gurte können im Notfall mit einer Schere durchgeschnitten werden.
- Befestigen Sie einen Rückhaltegurt NIEMALS an einer Seitenleiste oder am Fuß-/Kopfteil.
- Verwenden Sie Posey-Produkte NIEMALS auf Toiletten, Stühlen oder Möbeln, die eine ordnungsgemäße Anwendung gemäß den Anweisungen in der Anwendungsanleitung nicht zulassen. NICHT zu Hause verwenden.
- Setzen Sie dieses Produkt NIEMALS offenen Flammen, Feuer, rauchenden Materialien oder starken Hitzequellen aus. Einige Produkte können schmelzen oder sich entzünden und verbrennen. Die Raucher-/Nichtraucherpolitik Ihrer Einrichtung sollte strikt eingehalten werden.
- Ein Posey Produkt darf NIEMALS als Sicherheitsgurt in einem fahrenden Fahrzeug verwendet werden. Posey Produkte sind nicht dafür konzipiert, der Kraft eines Crashes oder plötzlichen Stopps standzuhalten.
- Testen Sie Reißverschlüsse oder Klettverschlüsse vor jedem Gebrauch. ENTSORGEN Sie das Produkt, wenn es nicht sicher befestigt werden kann.

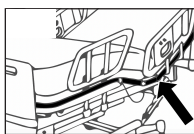

## ANLEITUNG ZUM WASCHEN (falls zutreffend):

- Schließen Sie alle Schnallen und Schösser, um das Risiko einer Beschädigung während des Wasch- und Trockenvorgangs zu verringern. KEINE Schnallen oder Schösser durch Extraktoren stecken. Für maximale Lebensdauer in einem Wäschesack waschen.
- Edelstahl-Schösser: Posey empfiehlt, die Schösser nach jeder Reinigung mit einem Trockenschmiermittel (Silikon) zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge des Schmiermittels in das Schloss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Betätigen Sie den Schließmechanismus des Schlosses mehrere Male mit dem Schlüssel, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gut abgeschmiert sind.
- Vor dem Waschen sollten Sie den Reißverschluss hochziehen und das Produkt von innen nach außen drehen, um den Reißverschluss zu schützen.
- Klettverschlüsse können nach mehrmaligem Gebrauch oder Waschen Fusseln aufnehmen und so die Griffestigkeit verringern. Befestigen Sie den „Haken“ vor dem Waschen an der „Schlaufe“, um Fusselbildung zu vermeiden. Bei Bedarf Fusseln von der „Hakenseite“ mithilfe einer Bürste mit harten Borsten entfernen.

• Diese Produkte, mit Ausnahme von Schaumstoffprodukten, können nach den CDC\*-Richtlinien für mit Blut oder Körperflüssigkeit verschmutztes Material in der Waschmaschine gewaschen werden.



- Für nicht kontaminiertes Material verwenden Sie Wasch- und Trockenzyklen bei niedrigerer Temperatur, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

- Für Schaumstoffprodukte:




- Stellen Sie sicher, dass die Produkte vor der Verwendung vollständig trocken sind.

## LAGERUNG UND HANDHABUNG:

- Dieses Produkt ist für den Einsatz in normalen Innenräumen konzipiert.
- Dieses Produkt kann bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Das Produkt vor übermäßiger Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit schützen, da es dadurch beschädigt werden kann.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

## SO BINDEN SIE DIE POSEY SCHNELLVERSCHLUSS-SCHLAUFE

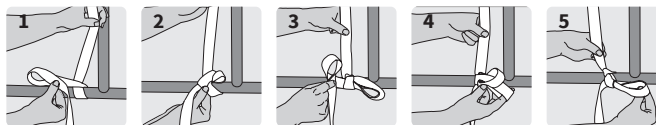

1. Wickeln Sie den Gurt einmal um den Bettrahmen, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht an Seitenschiene oder Kopf-/Fußende befestigen), und lassen Sie dabei mindestens ein 20 cm langes Endstück zurück. Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine Schlaufe zu bilden, und kreuzen Sie es über das andere Ende.
2. Legen Sie den gefalteten Gurt dort ein, wo sich die Bänder kreuzen, als ob Sie einen Schnürsenkel binden würden. Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen.
3. Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine zweite Schlaufe zu bilden.
4. Fügen Sie die zweite Schleife in die erste Schleife ein.
5. Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest sitzt und in keine Richtung verrutschen kann.
6. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Üben Sie das schnelle Öffnen, um sicherzustellen, dass sich der Knoten mit einem Zug am losen Ende des Riemens löst.

DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. | Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**ENTSORGUNG:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Vorschriften der Einrichtung oder nach dreißig Tagen der Verwendung bzw. früher, falls das Produkt verschlissen oder beschädigt ist.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA  
Telefon: +1 800 447 6739 • International: +1.920.751.4036 • [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Deutschland



UK Verantwortliche Person  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
Vereinigtes Königreich



19200B REV E 2021-05-14




**ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE VENTA CON RECETA MÉDICA.** La legislación federal de EE. UU. autoriza la venta exclusivamente a médicos o por orden de estos. Para uso exclusivo en centros sanitarios autorizados.

**FORMACIÓN DEL PERSONAL:** Tidi ofrece ayuda formativa interna de forma gratuita. Póngase en contacto con Tidi a través de [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) o llame al número gratuito 1.800.447.6739.

**ANTES DE APLICAR LAS SUJECIONES:** siga las políticas y procedimientos de sujeción de su hospital que cumplan con las directrices de los CMS de EE. UU. y las leyes estatales u otras agencias gubernamentales fuera de los EE. UU.

### ⚠️ ADVERTENCIAS ADICIONALES:

- Supervise SIEMPRE al paciente según la política del centro. Una aplicación o uso inadecuados de una sujeción puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Tenga en cuenta que se requerirá una supervisión constante para:
  - pacientes agresivos o inquietos, y
  - pacientes en decúbito supino (asegúrese de que esta posición no provoque ninguna complicación para aquellas personas en riesgo de vomitar mientras estén sujetas).
- NUNCA altere ni repare este producto. Inspecciónelo SIEMPRE antes de cada uso: busque costuras o partes rotas, material rasgado, cortado o deshilachado y compruebe si los bloqueos, hebillas o cierres de velcro no sujetan firmemente. NO use productos dañados o sucios. Hacerlo puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Elimine el producto según las políticas del centro sobre materiales CON RIESGO BIOLÓGICO.
- SIEMPRE fije las correas a una parte del marco que se mueva con el paciente (no al cabecero, el estribo o los laterales), fuera del alcance de los pacientes y usando bridas o hebillas de liberación rápida (consulte la imagen a continuación). De esta forma se pueden liberar rápidamente en caso de accidente o incendio. Pruébelas para asegurarse de que las correas no se pueden apretar, aflojar o resbalar y que no se pueda crear holgura excesiva. Si esto ocurre, el paciente podrá deslizarse de la silla o la cama, lo que aumenta el riesgo de lesión grave o asfixia. La liberación de la sujeción es una parte importante de los simulacros de incendios y catástrofes de los centros. Las correas se pueden cortar con tijeras en caso de emergencia.
- NNUNCA fije una correa de sujeción a un lateral o al cabecero o estribo de la cama.
- NUNCA use los productos de Posey en inodoros, sillas o mobiliario que no permita una correcta aplicación como se indica en las instrucciones de aplicación. NO use el producto en casa.
- NUNCA exponga el producto a llamas abiertas, fuego, materiales humeantes o fuentes de calor. Algunos productos pueden derretirse o prenderse y quemarse. Se deberá aplicar estrictamente la política relativa a la prohibición de fumar del centro.
- NUNCA use un producto de Posey como cinturón de seguridad en un vehículo en movimiento. Los productos de Posey no están diseñados para resistir la fuerza de una colisión o una parada repentina.
- Pruebe las cremalleras y los cierres de velcro antes de cada uso. ELIMINE el producto si no se sujeta firmemente.

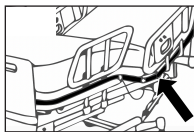

### INSTRUCCIONES DE LAVADO (cuando proceda):

- Sujete todas las hebillas y bloqueos para reducir el riesgo de daño durante los ciclos de lavado y secado. NO pase las hebillas ni los bloqueos por extractores. Para una máxima vida útil, lave los productos en una bolsa para lavado.
- Bloqueos de acero inoxidable: Posey recomienda tratar los bloqueos con un lubricante de película seca (silicona) tras cada lavado. Para obtener un resultado óptimo, pulverice una pequeña cantidad en el bloqueo. Haga funcionar el mecanismo del bloqueo con una llave varias veces para asegurarse de que todas las superficies estén lubricadas.
- Antes de lavarlo, cierre la cremallera y ponga el producto del revés para protegerla.
- Es posible que los cierres de velcro acumulen pelusa tras un uso repetido o el lavado, lo que reduce la fuerza de agarre. Cíerrelos antes de lavarlos para evitar la acumulación de pelusa. Si es necesario, use un cepillo de cerda dura para retirar la pelusa del velcro.

• Todos los productos que no sean de espuma se pueden lavar a máquina de acuerdo con las pautas de los CDC\* sobre material manchado de sangre o líquidos corporales.

160°F  
71°C

LAVAR EN AGUA CALIENTE 25 MIN.

CL

LEÍJA SEGÚN SE INDICA EN EL ENVASE

OC

SECAR A BAJA TEMP.

- En el caso de los materiales no contaminados, ponga ciclos de lavado y secado a una temperatura menor para ampliar la vida útil del producto.

• Para productos de espuma:

100°F  
38°C

LAVAR EN AGUA TIBIA

CL

LEÍJA SEGÚN SE INDICA EN EL ENVASE

OC

SECAR A BAJA TEMP.


- Asegúrese de que los productos estén completamente secos antes de su uso.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

- Este producto está diseñado para su uso en entornos interiores normales.
- Este producto puede almacenarse a temperatura ambiente de almacén a niveles de humedad normales. Evite el exceso de humedad o alta humedad que pueda dañar los materiales del producto.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

### CÓMO ATAR LA BRIDA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POSEY

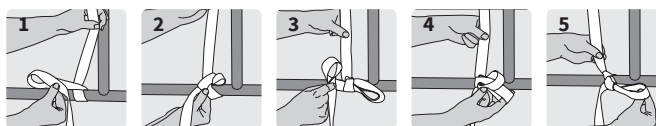

- Enrolle la correa una vez alrededor del marco que se mueve con el paciente (no la sujete a los laterales ni al cabecero o al estribo de la cama). Deje un extremo suelto de unos 20 cm como mínimo. Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un lazo y crúcelo por el otro extremo.
- Inserte la correa plegada donde las correas se cruzan entre sí, como si atara los cordones de unos zapatos. Tire del lazo para tensarlo.
- Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un segundo lazo.
- Inserte el segundo lazo en el primer lazo.
- Tire del lazo para tensarlo. Pruébelo para asegurarse de que la correa esté fija y no se resbale a ninguna dirección.
- Repita en el otro lado. Pruebe las bridas de liberación rápida para garantizar que el nudo se libere al tirar del extremo suelto de la correa.

ES

Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro. | Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**ELIMINACIÓN:** elimine el producto de acuerdo con las directrices del centro o tras 30 días de uso o antes si el producto está desgastado o dañado.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.  
Teléfono: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Alemania



UK Persona Responsible  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
Reino Unido



19200B REV E 2021-05-14



**PRODUITS EXCLUSIVEMENT DÉLIVRÉS SUR PRESCRIPTION.** La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin. Exclusivement destiné à une utilisation dans un établissement de santé agréé.

**FORMATION DU PERSONNEL:** Tidi propose des aides gratuites à la formation en cours d'emploi. Veuillez contacter Tidi en ligne à l'adresse suivante: [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) ou gratuitement par téléphone au numéro suivant: 1 800 447 6739.

**AVANT D'APPLIQUER LA CONTENTION:** Veuillez suivre les politiques et les procédures de contention de votre hôpital, en conformité avec les directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), les lois locales des États-Unis ou, en dehors des États-Unis, des autorités compétentes.


### ⚠ MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES:

1. TOUJOURS surveiller le patient conformément à la politique de l'établissement. L'application ou l'utilisation inappropriées d'un dispositif de contention peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Une surveillance constante peut être nécessaire pour:

- les patients agressifs ou agités, et
- les patients en décubitus dorsal; veuillez vous assurer que cette position n'entraîne pas des complications chez les patients risquant de vomir pendant la contention.

2. NE JAMAIS altérer ou réparer ce produit. TOUJOURS l'inspecter avant son utilisation: déterminer si le produit comporte des coutures ou des pièces endommagées; du matériau déchiré, coupé ou effiloché; ou verrous, boucles ou attaches à boucles et à crochets qui ne s'attachent pas bien. NE PAS utiliser des produits souillés ou endommagés. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. Se débarrasser des produits endommagés conformément à la politique de l'établissement en matière de matériaux BIOLOGIQUEMENT DANGEREUX.

3. TOUJOURS attacher les sangles à une partie du cadre qui se déplace avec le patient (et non au pied ou à la tête de lit ou aux rails latéraux), hors de portée du patient, à l'aide d'attaches à dégagement rapide (voir dessin ci-dessous) ou de boucles. Celles-ci permettront une libération facile en cas d'accident ou d'incendie. Tester pour s'assurer que les sangles ne peuvent pas se serrer, se desserrer ou glisser et devenir trop lâches. Si cela se produit, le patient peut glisser de la chaise ou du lit, et risquer des blessures graves ou la suffocation. L'ouverture des dispositifs de contention est une partie importante des exercices de secours en cas d'incendie et de catastrophe. Les sangles peuvent être coupées avec des ciseaux en cas d'urgence.

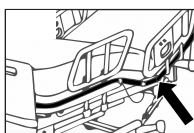

4. NE JAMAIS fixer les sangles au rail latéral, à la tête ou au pied du lit.
5. NE JAMAIS utiliser de produits Posey sur des toilettes ou encore sur des sièges ou des meubles qui ne permettent pas leur application conformément aux instructions d'application. NE PAS utiliser à domicile.
6. NE JAMAIS exposer ce produit à une flamme nue, un feu, des matériaux en combustion ou des sources de chaleur élevée. Certains produits peuvent fondre ou s'enflammer et brûler. La politique de l'établissement en matière de tabagisme doit être strictement appliquée.
7. NE JAMAIS utiliser un produit Posey comme ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement. Les produits Posey ne sont pas conçus pour résister à la force d'un accident ou d'un arrêt soudain.
8. Tester les fermetures à glissière ou les attaches à boucles et à crochets avant chaque utilisation. JETER le dispositif s'il ne peut pas s'attacher solidement.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE (le cas échéant):

- Attacher toutes les boucles et serrures pour réduire les risques de dommages pendant les cycles de lavage et de séchage. NE PAS mettre de boucles ou de verrous dans des extracteurs. Pour maximiser la durée de vie du produit, le laver dans un sac à linge.
- Serrures en acier inoxydable: Posey recommande de traiter les serrures avec un lubrifiant à film sec (silicone) après chaque nettoyage. Pour de meilleurs résultats, pulvériser une petite quantité dans la serrure. Faire fonctionner la serrure plusieurs fois avec une clé afin de s'assurer que toutes les surfaces ont bien été lubrifiées.
- Avant de laver le produit, le fermer et le retourner pour protéger la fermeture à glissière.
- Des peluches peuvent s'accumuler sur les attaches à boucles et crochets après un usage répété ou un lavage, réduisant ainsi la force de préhension. Attacher le « crochet » à la « boucle » avant le lavage pour éviter l'accumulation de peluches. Le cas échéant, utiliser une brosse à poils rigides pour retirer les peluches du côté « crochet ».

• Ces produits, à l'exception des produits en mousse, peuvent être lavés à la machine selon les directives du CDC\* pour les produits souillés de sang ou de fluides corporels.



- Pour les matériaux non contaminés, utiliser des cycles de lavage et de séchage à basse température pour prolonger la durée de vie du produit.

• Pour les produits en mousse:




- Assurez-vous que les produits sont entièrement secs avant de les utiliser.

### STOCKAGE ET MANIPULATION:

- Ce dispositif est conçu pour être utilisé dans des environnements d'intérieur normaux.
- Ce dispositif peut être stocké à des températures ambiantes à des niveaux d'humidité normaux. Éviter des environnements aux taux d'humidité élevés qui pourraient endommager les matériaux du produit.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

### COMMENT FIXER LES ATTACHES À DÉGAGEMENT RAPIDE POSEY

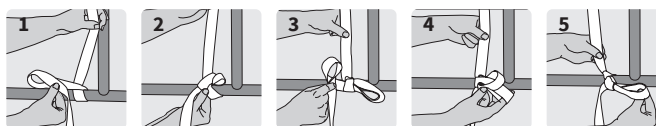

1. Enrouler une fois la sangle autour du cadre qui se déplace avec le patient (ne pas l'attacher au rail latéral ou à la tête/au pied de lit), en laissant au moins une longueur de 8 pouces (20 cm). Plier l'extrémité libre en deux pour créer une boucle et la croiser sur l'autre extrémité.
2. Insérer la sangle pliée à l'endroit où les sangles se croisent, comme pour attacher un lacet de chaussure. Tirer sur la boucle pour serrer.
3. Plier l'extrémité libre en deux pour créer une seconde boucle.
4. Insérer la seconde boucle dans la première boucle.
5. Tirer sur la boucle pour serrer. Tester pour s'assurer que la sangle est bien fixée et ne glissera dans aucune direction.
6. Répéter de l'autre côté. Tester les attaches à dégagement rapide pour s'assurer que le noeud se libère en tirant sur l'extrémité libre de la sangle.

FR

Signalez tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. | Les traductions de ce document en allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais sont disponibles sur le site [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**ÉLIMINATION:** Éliminer le produit conformément aux directives de l'établissement ou après une utilisation de 30 jours ou moins si le produit est usé et endommagé.



**SOLO PER PRODOTTI SU PRESCRIZIONE.** La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di richiesta medica. Esclusivamente per l'uso in una struttura sanitaria approvata.

**FORMAZIONE DEL PERSONALE:** Tidi offre servizi di formazione intraziendale gratuiti. Contattare Tidi online all'indirizzo [www.tidiprodotti.com](http://www.tidiprodotti.com) o chiamare il numero verde (in USA) 1.800.447.6739.

**PRIMA DI APPLICARE QUALSIASI MISURA DI CONTENZIONE:** seguire le politiche e le procedure di contenzione dell'ospedale conformi alle linee guida dei CMS statunitensi e alle normative statali o di altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti.

### ⚠️ ULTERIORI AVVERTENZE:

1. Monitorare SEMPRE il paziente in conformità alle politiche della struttura. L'applicazione o l'uso errati di qualsiasi misura di contenzione possono causare lesioni gravi o la morte. Potrebbe essere necessario un monitoraggio costante per:
  - Pazienti aggressivi o agitati; e
  - Pazienti in posizione supina; assicurare che la posizione non causi complicazioni a chi è a rischio di vomito durante la contenzione.
2. Non modificare o riparare MAI questo prodotto. Ispezionare SEMPRE prima di ogni utilizzo: controllare che non siano presenti punti o parti rotti, materiale lacerato, tagliato o usurato oppure chiusure, fibbie e fissaggi con velcro che non bloccano in modo sicuro. NON utilizzare prodotti sporchi o danneggiati onde evitare di provocare lesioni gravi o la morte. Smaltire i prodotti danneggiati in conformità alle politiche della struttura per i materiali A RISCHIO BIOLOGICO.
3. Fissare SEMPRE le cinghie a una parte del telaio che si muove con il paziente (non pediera/testiera o sponde laterali), al di fuori della portata del paziente, utilizzando legature a sgancio rapido (vedere il disegno di seguito) o fibbie che permettano un facile rilascio in caso di incidente o di incendio. Verificare che le cinghie non possano stringersi, allentarsi o scivolare creando un lasco eccessivo. In tal caso, il paziente potrebbe scivolare dalla sedia o dal letto, aumentando il rischio di lesioni gravi o soffocamento. Il rilascio della contenzione è una parte importante delle esercitazioni antincendio e anticalamità di una struttura. In caso di emergenza, le cinghie possono essere tagliate con le forbici. 
4. Non fissare MAI la cinghia di contenzione alle sponde laterali o alla testiera/pediera.
5. Non utilizzare MAI i prodotti Posey su tazze del WC o su qualsiasi sedia o mobile che non permetta una corretta applicazione, descritta nelle istruzioni di applicazione. NON utilizzare a casa.
6. Non esporre MAI il prodotto a fiamme aperte, fuoco, fumo o fonti di calore elevato. Alcuni prodotti possono fondersi o accendersi e bruciare. Rispettare rigorosamente le politiche di divieto del fumo della struttura.
7. Non usare MAI un prodotto Posey come cintura di sicurezza in un veicolo in movimento. I prodotti Posey non sono progettati per sostenere la forza di un urto o di un arresto improvviso.
8. Controllare le cerniere e i fissaggi con Velcro prima di ogni utilizzo. ELIMINARE il dispositivo se non permette un fissaggio sicuro.

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO (se applicabile):

- Chiudere tutte le fibbie e le chiusure per ridurre il rischio di danni durante i cicli di lavaggio e di asciugatura. NON inserire le fibbie o le chiusure in estrattori. Per prolungare al massimo la durata, lavare in una sacca da lavanderia.
- Chiusure in acciaio inossidabile: Posey raccomanda di trattare le chiusure con un lubrificante che formi una pellicola asciutta (silicone) dopo ogni pulizia. Per risultati ottimali, spruzzarne una piccola quantità nella chiusura. Azionare la chiusura con una chiave più volte per assicurare che tutte le superfici siano ben lubrificate.
- Prima del lavaggio, chiudere le cerniere e rivoltare il prodotto per proteggerle.
- I fissaggi con Velcro possono raccogliere pelucchi dopo l'uso ripetuto o il lavaggio, riducendo la tenuta della chiusura. Prima del lavaggio, far aderire le due parti dei fissaggi con Velcro l'una all'altra per prevenire l'accumulo di pelucchi. Se necessario, utilizzare una spazzola rigida per rimuovere i pelucchi dal lato con i gancetti del fissaggio con Velcro.

- Questi prodotti, diversamente da quelli in schiuma, possono essere lavati in lavatrice seguendo le linee guida dei CDC\* relative ai materiali sporchi di sangue o di liquidi corporei.



- Per i materiali non contaminati, utilizzare cicli di lavaggio e asciugatura a bassa temperatura per prolungare la vita del prodotto.

- Per i prodotti in schiuma:




- Verificare che i prodotti siano completamente asciutti prima dell'uso.

### CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE:

- Questo dispositivo è progettato per l'uso in normali ambienti al chiuso.
- Questo dispositivo può essere conservato alla temperatura ambiente di un deposito con livelli di umidità normali. Evitare di esporre a condizioni di umidità elevata o eccessiva, in quanto si rischia di danneggiare i materiali che compongono il prodotto.

\*www.cdc.gov

### COME REALIZZARE LA LEGATURA A SGANCIO RAPIDO POSEY

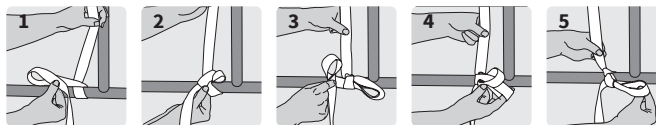

1. Avvolgere la cinghia una volta intorno al telaio che si muove con il paziente (non fissare alle sponde laterali o alla testiera/pediera), lasciando una coda di almeno 20 cm. Piegare a metà l'estremità libera per creare un anello e farlo passare sull'altra estremità.
2. Inserire la cinghia piegata nel punto in cui si intersecano le cinghie, come quando si allacciano le stringhe delle scarpe. Tirare l'anello per stringere.
3. Piegare a metà l'estremità dell'anello per creare un secondo anello.
4. Inserire il secondo anello nel primo.
5. Tirare l'anello per stringere. Verificare che la cinghia sia fissata e non scorra in nessuna direzione.
6. Ripetere sull'altro lato. Testare le legature a sgancio rapido per accertarsi che il nodo si apra tirando una volta l'estremità libera della cinghia.

IT

Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. | Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili sul sito [www.tidiprodotti.com/IFU](http://www.tidiprodotti.com/IFU).

**SMALTIMENTO:** smaltire il prodotto in conformità alle linee guida della struttura oppure dopo trenta giorni di utilizzo o meno nel caso in cui il prodotto sia usurato o danneggiato.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA  
Telefono: 1.800.447.6739 • Internazionale: +1.920.751.4036  
[www.tidiprodotti.com](http://www.tidiprodotti.com)

© Posey Products, LLC. Tutti i diritti riservati.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Germania



UK Persona responsabile  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
Regno Unito



19200B REV E 2021-05-14




**UITSLUITEND VOOR PRODUCTEN OP VOORSCHRIFT.** Dit hulpmiddel mag volgens de Amerikaanse wet uitsluitend op voorschrift van een arts verkocht worden. Uitsluitend bestemd voor gebruik in medische instellingen met vergunning.

**OPLEIDING MEDEWERKERS:** Tidi biedt gratis trainingshulpmiddelen voor de praktijk. Neem hiervoor online contact op met Tidi op [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) of bel gratis via 1.800.447.6739 (in de VS).

**VÓÓR HET TOEPASSEN VAN EEN IMMOBILISATIEHULPMIDDEL:** volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis inzake immobilisatie die voldoen aan de Amerikaanse CMS-richtlijnen en wetgeving of aan die van andere regelgevende instanties buiten de VS.

## ⚠️ AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN:

- Patiënten moeten ALTIJD volgens het instellingsbeleid gevolgd worden. Verkeerd aanbrengen of verkeerd gebruik van immobilisatiehulpmiddelen kan resulteren in ernstig of dodelijk letsel. Denk eraan dat constant toezicht gewenst kan zijn voor:
  - agressieve of onrustige patiënten; en
  - achteroverliggende patiënten; controleer of deze houding niet tot complicaties leidt bij patiënten die zouden kunnen overgeven terwijl ze geïmmobiliseerd zijn.
- Dit product mag NOOIT gewijzigd of gerepareerd worden. ALTIJD inspecteren vóór ieder gebruik: controleer op kapotte steken of onderdelen, op gescheurd, doorsneden of gerafeld materiaal en op vergrendelingen, gespen en klittenbandsluitingen die niet goed werken. Vuile of beschadigde producten NIET gebruiken. Dat kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Beschadigde producten wegwerpen volgens het instellingsbeleid voor BIOLOGISCH GEVAARLIJK materiaal.
- Maak riempjes ALTIJD vast aan een gedeelte van het frame dat met de patiënt mee beweegt (niet aan voeten-/hoofdeinde of zijrails), buiten het bereik van de patiënt, met behulp van de snelkoppelingsbanden (zie onderstaande tekening) of gespen. Hiermee kan het hulpmiddel bij ongelukken of brand snel losgemaakt worden. Verricht een test om te verzekeren dat de riempjes niet te strak kunnen gaan zitten, niet los kunnen komen en niet kunnen slippen waardoor te veel speling ontstaat. In dat geval kan de patiënt van de stoel of het bed glijden, waardoor het risico op ernstig letsel of verstikking toeneemt. Het losmaken van de immobilisatiehulpmiddelen is een belangrijk aspect van brand- en rampenoefeningen bij de instelling. De riempjes kunnen in noodgevallen met een schaar worden doorgeknipt.
- Maak immobiliserierempjes NOOIT vast aan zijrails of hoofd-/voeteneinde.
- Gebruik Posey-producten NOOIT op toiletten of op stoelen of meubilair waarop de producten niet volgens de aanwijzingen voor het aanbrengen bevestigd kunnen worden. NIET thuis gebruiken.
- Dit product NOOIT blootstellen aan open vuur, brand, rokend materiaal of sterke warmtebronnen. Sommige producten kunnen smelten of ontbranden/verbranden. De regels voor al dan niet roken bij de instelling moeten strikt gehandhaafd worden.
- Gebruik Posey-producten NOOIT als veiligheidsgordel in rijdende voertuigen. Posey-producten zijn niet bestand tegen krachten die vrijkomen bij aanrijdingen of plotseling stoppen.
- Controleer vóór elk gebruik de rits- en klittenbandsluitingen. GOOI het hulpmiddel WEG als het niet goed bevestigd kan worden.

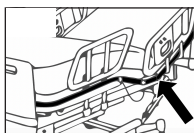

## WASVOORSCHRIFT (waar van toepassing):

- Bevestig alle gespen en vergrendelingen om de kans op beschadiging tijdens het wassen en drogen te verminderen. Gespen en vergrendelingen mogen NIET door een wringer gehaald worden. Gebruik voor een maximale levensduur zo mogelijk een wasnet.
- Roestvrijstalen sloten: Posey raadt aan de sloten na het reinigen te behandelen met een droog smeermiddel (silicone). Spuit voor het beste resultaat een kleine hoeveelheid in het slot. Draai het slot een aantal keer open en dicht met de sleutel zodat alle oppervlakken goed worden gesmeerd.
- Trek alle ritsen dicht en keer het product binnenstebuiten om de rits te beschermen voordat u het product wast.
- Klittenband kan na herhaald wassen pluis bevatten waardoor het minder goed vast blijft zitten. Bevestig de haakjes op de lusjes voor het wassen om de afzetting van pluis te beperken. Gebruik zo nodig een harde borstel om het pluis uit het klittenband te verwijderen.

- Met uitzondering van de schuimrubberen producten kunnen deze producten in de wasmachine worden gewassen volgens de richtlijnen van de Amerikaanse CDC\* voor met bloed of lichaamsvloeistoffen verontreinigd materiaal.



- Was en droog ongecontamineerd materiaal op lagere temperaturen zodat het product langer meegaat.

- Voor schuimrubberen producten:




- Zorg ervoor dat de producten vóór gebruik volledig droog zijn.

## OPSLAG EN GEBRUIKSIJNSTRUCTIES:

- Dit hulpmiddel is bestemd voor gebruik in een normale binnenomgeving.
- Dit hulpmiddel kan worden opgeslagen in magazijnen bij omgevingstemperatuur met een normale vochtigheidsgraad. Vermijd overmatig vocht of hoge vochtigheid waardoor het materiaal van het product beschadigd kan raken.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

## VASTMAKEN VAN DE POSEY-SNELKOPPELINGSBAND

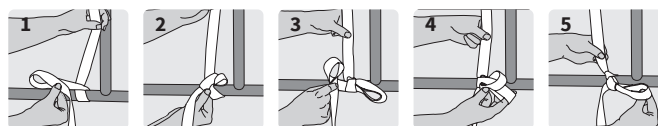

- Wikkel het riempje eenmaal rond het frame dat met de patiënt meebeweegt (niet aan zijrails of hoofd-/voeteneinde bevestigen) en laat een gedeelte van minimaal 20 cm over. Vouw het losse uiteinde dubbel om een lus te vormen en leg deze over het andere uiteinde.
- Steek het omgevouwen riempje door de plaats waar de riempjes elkaar kruisen, net zoals bij het strikken van een schoenveter. Trek de lus strak.
- Vouw het losse uiteinde dubbel om een tweede lus te vormen.
- Haal de tweede lus door de eerste lus.
- Trek de lus strak. Controleer of het riempje goed vastzit en niet kan verschuiven.
- Herhaal dit aan de andere kant. Oefen in het snel losmaken van de riempjes om te verzekeren dat de knoop meteen loskomt als u aan het losse uiteinde van het riempje trekt.

NL

Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. | Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**VERWIJDEREN:** gooi het product weg volgens de richtlijnen van de instelling, na dertig dagen gebruik of eerder indien het product is versleten of beschadigd.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 VS  
Telefoon: 1.800.447.6739 • Internationaal: +1.920.751.4036 • [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Duitsland



UK Verantwoordelijke persoon  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
Verenigd Koninkrijk



19200B REV E 2021-05-14






**APENAS PARA PRODUTOS SOB PRESCRIÇÃO.** A legislação federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou em nome de um médico. Para utilização apenas numa instituição de cuidados de saúde autorizada.

**FORMAÇÃO DE PESSOAL:** a Tidi facilita ajudas de formação no terreno sem quaisquer custos. Contacte a Tidi online em [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com) ou ligue para o número gratuito 1.800.447.6739.

**ANTES DE APLICAR QUALQUER IMOBILIZADOR:** siga as políticas e os procedimentos de imobilização do seu hospital que estejam em conformidade com as orientações dos CMS e a legislação estatal nos EUA, ou outras agências reguladoras fora dos EUA.

**⚠ AVISOS ADICIONAIS:**

1. Monitorize SEMPRE o doente segundo a política da instituição. A aplicação ou utilização inadequada de qualquer imobilizador poderá resultar em lesões graves ou morte. Tenha em mente que poderá ser necessária uma monitorização constante para:
  - Doentes agressivos ou agitados; e
  - Doentes em posição supina; certifique-se de que o facto de estar nesta posição não causa quaisquer complicações para os doentes que apresentam risco de vômitos enquanto estão imobilizados.
2. NUNCA altere nem repare este produto. Inspeccione SEMPRE antes de cada utilização: verifique quanto à presença de pontos ou componentes danificados; material rasgado, cortado ou desgastado; ou bloqueios, fivelas ou fechos de velcro que não imobilizam com firmeza. NÃO utilize produtos sujos ou danificados. Isso poderia resultar em lesões graves ou morte. Elimine os produtos danificados segundo a política de materiais de RISCO BIOLÓGICO da instituição.
3. Fixe SEMPRE as cintas a uma parte da estrutura que se mova com o doente (que não seja o painel da cabeça/pés ou guardas laterais), fora do alcance dos doentes, utilizando nós (veja o esquema abaixo) ou fivelas de libertação rápida. Estes permitem uma libertação fácil em caso de acidente ou incêndio. Teste para garantir que as cintas não apertam, afrouxam ou criam folga em excesso. Se isto ocorrer, o doente poderá deslizar da cadeira ou cama, aumentando o risco de lesão grave ou asfixia. A libertação de imobilizadores é uma parte importante dos exercícios de desastres e incêndios na instituição. As cintas podem ser cortadas com tesoura numa emergência.
4. NUNCA fixe cintas imobilizadoras à guarda lateral ou ao painel dos pés/cabeça.
5. NUNCA utilize produtos Posey em sanitas ou em qualquer cadeira ou móvel que não permita uma aplicação adequada conforme indicado nas Instruções de aplicação. NÃO utilize em casa.
6. NUNCA exponha este produto a chamas desprotegidas, fogo, materiais associados ao tabagismo ou fontes de elevado calor. Alguns produtos poderão derreter ou entrar em combustão e arder. A política de tabagismo/antitabagismo da instituição deve ser aplicada com rigor.
7. NUNCA utilize um produto Posey como cinto de segurança num veículo em movimento. Os produtos Posey não foram concebidos para suportar a força de um acidente ou uma paragem repentina.
8. Teste os fechos-ecler ou fechos de velcro antes de cada utilização. ELIMINE o dispositivo se o mesmo não apertar com segurança.

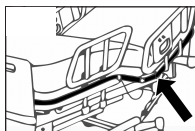

**INSTRUÇÕES DE LAVAGEM** (se aplicável):

- Aperte todas as fivelas e bloqueios para reduzir o risco de danos durante os ciclos de lavagem e secagem. NÃO coloque as fivelas ou bloqueios em máquinas de secar. Para uma vida útil máxima, lave dentro de um saco de lavagem.
- Bloqueios de aço inoxidável: a Posey recomenda que os bloqueios sejam tratados com um lubrificante de película seca (silicone) após cada limpeza. For obter os melhores resultados, pulverize uma pequena quantidade no bloqueio. Movimento o mecanismo do bloqueio com uma chave várias vezes para garantir que todas as superfícies ficam bem lubrificadas.
- Antes da lavagem, feche o fecho-ecler e vire o produto do avesso para proteger o fecho-ecler.
- Os fechos de velcro poderão acumular fiapos após lavagens ou utilizações repetidas, reduzindo deste modo a força da aderência. Feche o velcro antes da lavagem para ajudar a prevenir a acumulação de fiapos. Conforme necessário, utilize uma escova de cerdas suaves para remover fiapos do lado dos “ganchos”.

• Estes produtos, com a exceção dos produtos feitos de espuma, podem ser lavados à máquina em conformidade com as orientações da CDC\* referentes a materiais sujos com sangue ou fluidos corporais.

160°F  
71°C

LAVA A  
TEMP. ALTA  
25 MIN.

Cl

UTILIZAÇÃO DE LIXÍVIA  
CONFORME INDICADO NO  
RECIPIENTE

SECARA  
TEMP. BAIXA

- Para materiais não contaminados, utilize ciclos de lavagem e secagem de temperatura mais baixa para prolongar a vida útil do produto.

• Para produtos feitos de espuma:

100°F  
38°C

LAVA A  
TEMP. MORNHA

Cl

UTILIZAÇÃO DE LIXÍVIA  
CONFORME INDICADO NO  
RECIPIENTE

SECARA  
TEMP. BAIXA


- Certifique-se de que os produtos estão completamente secos antes da utilização.

**ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO:**

- Este dispositivo foi concebido para utilização em ambientes interiores normais.
- Este dispositivo pode ser armazenado a temperaturas ambiente de armazém, a níveis normais de humidade. Evite o excesso de humidade que possa danificar os materiais do produto.

\*[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

**COMO FAZER O NÓ DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA POSEY**

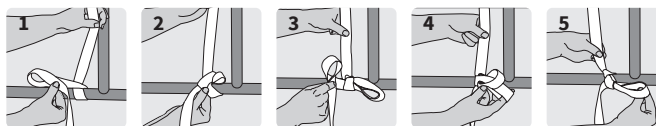

1. Enrole a cinta em torno da estrutura que se move com o doente (não fixe à guarda lateral ou painel dos pés/cabeça), deixando uma sobra de pelo menos 20 cm (8 pol.). Dobre a extremidade solta a meio para criar um laço e cruze-a sobre a outra extremidade.
2. Insira a cinta dobrada onde as cintas se cruzam, como se estivesse a apertar os cordões de um sapato. Puxe o laço para apertar.
3. Dobre a extremidade solta a meio para criar um segundo laço.
4. Insira o segundo laço no primeiro laço.
5. Puxe o laço para apertar. Teste para garantir que a cinta está segura e não desliza em nenhuma direção.
6. Repita do outro lado. Pratique os nós de libertação rápida para garantir que o nó se desfaz puxando uma vez pela extremidade solta da cinta.

PT

Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. | Traduções deste documento em francês, espanhol, neerlandês, alemão, italiano e português encontram-se em [www.tidiproducts.com/IFU](http://www.tidiproducts.com/IFU).

**ELIMINAÇÃO:** elimine o produto de acordo com as orientações da instituição ou após uma utilização de trinta dias, ou mais cedo, se o produto estiver desgastado ou danificado.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA  
Telefone: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover,  
Alemanha



UK Pessoa responsável  
Emergo Consulting (UK) Limited  
c/o CR360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB249BZ  
Reino Unido



19200B REV E 2021-05-14